

INSTRUÇÕES DE USO

Mepilex Transfer Ag

Nome técnico: Curativo

Nome comercial: Mepilex Transfer Ag

Modelos: 394090 - Mepilex Transfer Ag 7,5x8,5 cm – US; 394000 - Mepilex Transfer Ag 7,5x8,5 cm; 394190 - Mepilex Transfer Ag 10x12,5 cm – US; 394100 - Mepilex Transfer Ag 10x12,5 cm; 394590 - Mepilex Transfer Ag 20x50cm – US; 394500 - Mepilex Transfer Ag 20x50cm; 394890 - Mepilex Transfer Ag 15x20 cm – US; 394800 - Mepilex Transfer Ag 15x20 cm.

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico estéril”

“Produto médico esterilizado por óxido de etileno”

“Fabricante recomenda uso único”

“Não utilizar se a embalagem estiver danificada”

“Não contém látex de borracha natural”

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

Para todos os modelos, cada embalagem secundária contém 2, 5 ou 10 unidades de embalagens unitária.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O Mepilex Transfer Ag é um curativo de contato com a ferida, em silicone macio, que absorve e transfere o exsudado, mantém um ambiente úmido ideal para a cicatrização e é dotado de propriedades antimicrobianas.



O Mepilex Transfer Ag contém sulfato de prata que, em contato com fluidos, libera íons de prata que criam uma barreira eficaz contra as bactérias, inativando assim uma grande variedade de agentes patogênicos relacionados com as feridas (bactérias e fungos), tal como foi demonstrado *in vitro*. Ao reduzir o número de microrganismos, o Mepilex Transfer Ag pode também reduzir o odor.

Em ensaios *in vitro*, o Mepilex Transfer Ag demonstrou inativar agentes patogênicos relacionados com as feridas durante um período de até 14 dias. O Mepilex Transfer Ag é composto por:

1. uma camada adesiva Safetac
2. uma espuma de poliuretano comprimido contendo sulfato de prata e carbono ativado

Safetac é uma tecnologia patenteada de adesivo de silicone macio, que minimiza a dor nos pacientes e o trauma nas feridas e pele circundante. Minimiza a maceração ao isolar as margens da ferida, garantindo que o exsudado não se alastra à pele circundante.

O Mepilex Transfer Ag é macio e confortável, o que facilita manter o curativo em contato com a superfície da ferida e com a pele circundante, mesmo em zonas difíceis ou irregulares.

O Mepilex Transfer Ag mantém um ambiente úmido para a ferida em combinação com um curativo secundário adequado.



O Mepilex Transfer Ag pode ser cortado para se adaptar a várias formas e localizações das feridas.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Mepilex Transfer Ag foi concebido para o tratamento de uma ampla gama de feridas com exsudado baixo a elevado, e úlceras nas pernas e nos pés em que a aplicação de curativos é difícil, úlceras de pressão, feridas malignas, queimaduras de espessura parcial e locais de doação, onde existe o risco de infeção.

O Mepilex Transfer Ag pode ser utilizado sob ligaduras de compressão (não objetos deste registo).

Instruções de utilização:

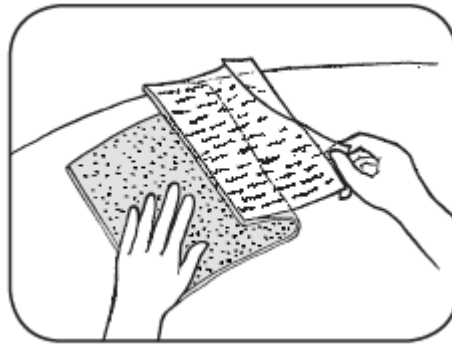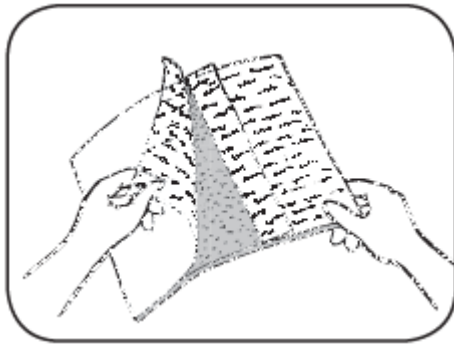

Note que deverão ser seguidos os procedimentos de higiene local antes e após a mudança do curativo.

1. Lave a ferida com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica padronizada.
2. Seque bem a pele circundante à ferida.
3. Corte com o tamanho adequado (se necessário), retire as películas antiaderentes e aplique o lado aderente na ferida. Não estique.

Para obter os melhores resultados, corte o Mepilex Transfer Ag de modo que fique sobreposto sobre a pele seca circundante em aproximadamente 2 cm nos tamanhos menores, e 5 cm nos tamanhos maiores.

4. Aplique um curativo secundário adequado que se sobreponha às margens do Mepilex Transfer Ag. Fixe se necessário.

O Mepilex Transfer Ag destina-se a uma utilização cumulativa de curto prazo, até 4 semanas (2 utilizações de 14 dias por curativo)

Para uma utilização continuada, é recomendada a reavaliação por um médico.

Frequência de troca de curativo

O Mepilex Transfer Ag poderá permanecer no local até 14 dias, dependendo do paciente, do estado da ferida e da pele circundante, ou como indicado pela prática clínica aceita.

Efeitos adversos

O Mepilex Transfer Ag poderá provocar a descoloração temporária do leito da ferida e da pele circundante.



A utilização do Mepilex Transfer Ag em uma área de produto muito grande em relação ao peso corporal (por exemplo, se usado em neonatos / crianças) ou uso excessivo de produtos de prata no mesmo paciente pode proporcionar uma citotoxicidade que leva a um retardo da cura.

Contraindicações

- Não utilizar em doentes com sensibilidade conhecida à prata ou a qualquer substância do curativo.
- Não utilize o Mepilex Transfer Ag durante tratamentos ou exames com radiação, por exemplo, raios X, ecografias, diatermia ou Imagiologia por Ressonância Magnética.
- Não utilize o Mepilex Transfer Ag juntamente com agentes oxidantes, tais como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio.

Advertências e precauções

- O Mepilex Transfer Ag deverá ser utilizado sob a supervisão de um profissional de cuidados de saúde qualificado.
- Não molhar a área do curativo durante a ducha/banho.
- Os profissionais de saúde/clínicos deverão ter em mente que existem dados muito limitados acerca da utilização prolongada ou repetida de curativos com teor de prata, em particular em crianças e recém-nascidos.
- Na eventualidade de infecção clínica, o Mepilex Transfer Ag não substitui a necessidade de terapêutica sistêmica ou outro tratamento adequado para as infecções.
- Evite o contato com eletrodos ou géis condutores durante medições eletrônicas, por exemplo, eletrocardiogramas (ECG) e eletroencefalogramas (EEG).
- Para além de solução salina ou água, a interação dos agentes de limpeza em combinação com o Mepilex Transfer Ag não foi demonstrada.
- A interação do Mepilex Transfer Ag com tratamentos tópicos não foi demonstrada.
- Apenas para uso externo.



- Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.
- Estéril. Não utilizar se a embalagem interior tiver sido danificada ou aberta antes da utilização. Não re-esterilizar.
- Não utilizar após a data de validade. Se o produto for utilizado após a data de validade, as propriedades do produto não podem ser garantidas.

Armazenamento

O Mepilex Transfer Ag deverá ser armazenado em condições secas e temperaturas abaixo dos 25 °C e protegido da exposição solar direta. Não existem restrições quanto às condições de umidade para armazenamento, transporte, manuseio.

Descarte

A eliminação deverá atender aos procedimentos ambientais locais. Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 222 de 2018 ou suas atualizações.

Validade: Vide embalagem

Registro ANVISA N°: 80733280012

Responsável Técnico: Rejane Vasques Biembengutt – CRBM 9150

E-MAIL: tecnovigilanciabr@molnlycke.com

Importador:

Molnlycke Health Care Vendas de Produtos Médicos Ltda
Avenida Portugal, nº 1100, parte C-43, Itaqui, Itapevi – SP
CEP: 06696-060
CNPJ: 12.600.168/0001-17

Fabricante Legal:

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, Suécia
SE-402 52

Fabricado na Finlândia